

Love your body: Welcome to Daysy

NEDERLANDS: Houd van je lichaam: Welkom bij Daysy

4 — Table of Contents

Page 6 to 8 | Precautions

What you need to know.

Page 9 to 21 | Operation

How to use Daysy.

Page 22 to 30 | Technical notes and warranty

What else you need to know.

Inhoudsopgave

Pagina 6 t/m 8 | Voorzorgsmaatregelen — Wat je moet weten.

Pagina 9 t/m 21 | Gebruik — Hoe je Daysy gebruikt.

Pagina 22 t/m 30 | Technische informatie en garantie — Wat je verder moet weten.

About Daysy

Daysy calculates a woman's daily menstrual cycle status by interpreting her basal body temperature. Daysy displays your menstrual cycle status using colored lights. Daysy is to be used to facilitate conception. Daysy is not a replacement for contraception, nor is it a medical thermometer.

Included in delivery:

- Daysy
- Sensor cap
- Micro USB cable
- Instructions for Use
- Quick Guide

Over Daysy

Daysy berekent de dagelijkse menstruatiecyclusstatus van een vrouw door haar basale lichaamstemperatuur te interpreteren. Daysy toont je menstruatiecyclusstatus met gekleurde lampjes. Daysy is bedoeld om de conceptie te bevorderen. Daysy is geen vervanging voor anticonceptie en ook geen medische thermometer.

In de verpakking:

- Daysy
- Sensorkap
- Micro-USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing
- Snelstartgids

6 — Precautions

- Before using your Daysy for the first time, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for later reference.
- Before you start using your Daysy, you need to entirely discontinue hormonal methods of birth control.
- Daysy can better determine your cycle if you have regular cycles.
- Daysy is not suitable for use if you are undergoing hormonal treatment, or if you are using hormonal methods of birth control.
- Daysy does not protect you from sexually transmitted diseases.
- You should always read your daily fertility status from Daysy itself, not the app.
- Before using Daysy for the first time, charge the battery fully.
- Never open the housing.
- Never chew on the sensor.
- Make sure that the device or its individual parts are not swallowed.
- **WARNING:** The device must not be modified.
- **WARNING:** Avoid using Daysy at or less than 30cm away from other electrical equipment, as this could result in improper operation.

Voorzorgsmaatregelen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat je Daysy voor de eerste keer gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats om hem later opnieuw te kunnen raadplegen.
- Voordat je Daysy gaat gebruiken, moet je volledig stoppen met hormonale anticonceptiemethoden.
- Daysy kan je cyclus beter bepalen als je regelmatige cycli hebt.
- Daysy is niet geschikt voor gebruik als je een hormonale behandeling ondergaat of hormonale anticonceptiemethoden gebruikt.
- Daysy beschermt je niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.
- Lees je dagelijkse vruchtbaarheidsstatus altijd af op Daysy zelf, niet in de app.
- Laad de batterij volledig op voordat je Daysy voor de eerste keer gebruikt.
- Open de behuizing nooit.
- Kauw nooit op de sensor.
- Zorg ervoor dat het apparaat of afzonderlijke onderdelen ervan niet worden ingeslikt.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet worden aangepast.
- **WAARSCHUWING:** Vermijd gebruik van Daysy op of binnen 30 cm van andere elektrische apparatuur, omdat dit tot een onjuiste werking kan leiden.

- **WARNING:** Use of cables or equipment other than those specified in this document may cause electrical interference or lead to failure of Daysy.
- Do not expose your Daysy to high temperatures (e.g. boiling water).
- Do not expose your Daysy to direct sunlight for long periods of time.
- Do not expose your Daysy to liquids such as running water.
- Only take measurements in your mouth.
- Do not insert the measuring sensor too far into your mouth.
- Do not take measurements if the housing and/or sensor is broken.
- Do not take measurements if you have an injury in your mouth.
- Do not expose your Daysy to heavy mechanical loads.
- Only take measurements when the USB cable is NOT connected.
- Only charge your Daysy using a standard 5V USB port (IEC 60950-1 compliant) with a maximum output current of 1A and a maximum power of 4.5W with a cable shorter than 50 cm. Do not take measurements while your Daysy is charging.
- If your Daysy causes irritation to your skin, we recommend you stop using it immediately and contact our Customer Support as soon as possible.

- **WAARSCHUWING:** Gebruik van kabels of apparatuur anders dan gespecificeerd in dit document kan elektrische interferentie veroorzaken of ertoe leiden dat Daysy niet goed functioneert.
- Stel je Daysy niet bloot aan hoge temperaturen, zoals kokend water.
- Stel je Daysy niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
- Stel je Daysy niet bloot aan vloeistoffen zoals stromend water.
- Meet alleen in je mond.
- Breng de meetsensor niet te ver in je mond in.
- Meet niet als de behuizing en/of sensor beschadigd is.
- Meet niet als je een verwonding in je mond hebt.
- Stel je Daysy niet bloot aan zware mechanische belasting.
- Meet alleen wanneer de USB-kabel NIET is aangesloten.
- Laad je Daysy alleen op met een standaard 5V-USB-poort (IEC 60950-1-conform) met een maximale uitgangsstroom van 1A en een maximaal vermogen van 4,5 W, met een kabel korter dan 50 cm. Meet niet terwijl je Daysy wordt opgeladen.
- Als je Daysy huidirritatie veroorzaakt, raden we aan het gebruik onmiddellijk te stoppen en zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice.


- Do not stick sharp objects into your Daysy.
- All serious incidents associated with this product should be reported to the manufacturer and the relevant government authority responsible in the EU member state.
- Your Daysy is intended for you alone. You should not share it with other women. If you do wish to pass it on to a friend, you will need to delete your data first and unpair Daysy in the app (if you use it).
- Only pass your Daysy on to another person with all instructions. You will also find the instructions and further useful information available for download at daysy.me.
- As a user, you can use every feature of your Daysy. You can also clean the sensor yourself when your Daysy is switched off.
- Your Daysy is not a contraceptive.
- Keep Daysy away from children and pets.

- Steek geen scherpe voorwerpen in je Daysy.
- Alle ernstige incidenten die samenhangen met dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde overheidsinstantie in de betreffende EU-lidstaat.
- Jouw Daysy is alleen voor jou bedoeld. Je mag haar niet delen met andere vrouwen. Als je haar toch aan een vriendin wilt doorgeven, moet je eerst je gegevens verwijderen en Daysy ontkoppelen in de app, als je die gebruikt.
- Geef je Daysy alleen aan iemand anders door samen met alle instructies. Je vindt de gebruiksaanwijzing en verdere nuttige informatie ook als download op daysy.me.
- Als gebruiker kun je elke functie van je Daysy gebruiken. Je kunt de sensor ook zelf reinigen wanneer Daysy is uitgeschakeld.
- Je Daysy is geen anticonceptiemiddel.
- Houd Daysy uit de buurt van kinderen en huisdieren.

All the features at a glance*

9

english

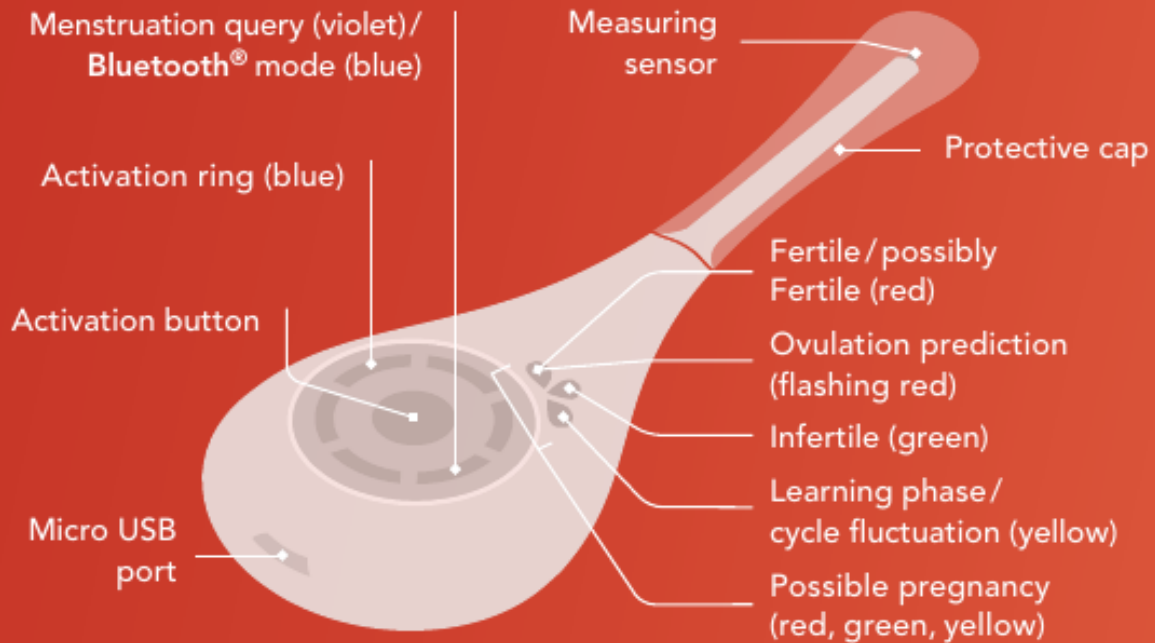

* Page 13 shows you all the important display combinations

Afbeelding met labels behouden uit het origineel. Nederlandse benamingen: Beschermkap; Meetsensor; Activeringsknop; Activeringsring (blauw); Menstruatievraag (paars) / Bluetooth®-modus (blauw); Vruchtbaar / mogelijk vruchtbaar (rood); Ovulatievoorspelling (knipperend rood); Onvruchtbaar (groen); Leerfase / cyclusschommeling (geel); Mogelijke zwangerschap (rood, groen, geel); Micro-USB-poort. * Pagina 13 toont alle belangrijke displaycombinaties.

— Step 1: Charge your Daysy

1. Connect your Daysy to the micro USB cable supplied in your package and the cable to a USB port. Make sure it is a 5V port that does not supply more than 1A current.
2. Press the activation button to see the charging status. The blue lights moving from bottom to top indicate Daysy is charging. Daysy will enter standby mode after 60 seconds but will continue charging.*
3. All blue lights remain illuminated when Daysy is fully charged. Simply press the activation button once to check the status. (A low battery condition is indicated by all blue lights flashing.)
4. Disconnect the cable from your Daysy. You can now begin using your Daysy.**

** Do not measure or try to sync whilst Daysy is charging.*

*** You can start measuring at any time in your cycle.*

Stap 1: Laad je Daysy op

1. Sluit je Daysy aan op de micro-USB-kabel die is meegeleverd en sluit de kabel vervolgens aan op een USB-poort. Zorg ervoor dat dit een 5V-poort is die niet meer dan 1A stroom levert.
2. Druk op de activeringsknop om de laadstatus te bekijken. De blauwe lampjes die van onder naar boven bewegen, geven aan dat Daysy wordt opgeladen. Daysy gaat na 60 seconden in stand-bymodus, maar blijft opladen.
3. Wanneer Daysy volledig is opgeladen, blijven alle blauwe lampjes branden. Druk eenvoudig één keer op de activeringsknop om de status te controleren. Een lage batterijstatus wordt aangegeven doordat alle blauwe lampjes knipperen.
4. Koppel de kabel los van je Daysy. Je kunt nu beginnen met het gebruik van je Daysy.

** Meet niet en probeer niet te synchroniseren terwijl Daysy wordt opgeladen.*

*** Je kunt op elk moment in je cyclus beginnen met meten.*

Measurement indicators: What each indicator means



Flashing violet light: Your Daysy is asking if you are menstruating. Confirm that you are menstruating by holding down the activation button for 2 seconds.



Violet light remains constantly illuminated: Daysy confirms your menstruation input. If you have entered your menstruation incorrectly or by mistake, hold the activation button for 2 seconds until the violet light starts flashing again.



Blue light rotating in a clockwise direction: Your Daysy is measuring your temperature. Holding down the activation button for 2 seconds stops the measurement.

Meetindicatoren: wat elke indicator betekent

- Knipperend paars licht: je Daysy vraagt of je menstrueert. Bevestig dat je menstrueert door de activeringsknop 2 seconden ingedrukt te houden.
- Paars licht blijft continu branden: Daysy bevestigt je menstruatie-invoer. Als je je menstruatie onjuist of per ongeluk hebt ingevoerd, houd dan de activeringsknop 2 seconden ingedrukt totdat het paarse licht weer begint te knipperen.
- Blauw licht dat met de klok mee roteert: je Daysy meet je temperatuur. Door de activeringsknop 2 seconden ingedrukt te houden, stop je de meting.

— Step 2: Measure your temperature

Use your Daysy every day after waking up and before you get out of bed. Please be sure to sleep 1 consecutive hour immediately prior to measuring.

1. Remove the protective cap and briefly press the activation button once. Your predicted fertility status will be displayed.
2. Press the button a second time and the activation ring will flash in a clockwise direction. You can now take a measurement.
3. Place the sensor as far back as is comfortable under the right or left side of your tongue and then close your mouth.
4. "Beep-beep" means that the measurement phase has successfully completed.*
5. The confirmed fertility status displayed after measurement is valid until midnight. You can view your fertility status again later in the day by pressing the activation button once briefly. The next day, your Daysy switches to the predicted fertility status before your measurement.

** If you hear a "grumble-buzz" sound instead of a "beep-beep", it means that the measurement was unsuccessful, and you will need to try again.*

Stap 2: Meet je temperatuur

Gebruik je Daysy elke dag nadat je wakker bent geworden en voordat je uit bed stapt. Zorg ervoor dat je direct voorafgaand aan de meting 1 uur aaneengesloten hebt geslapen.

1. Verwijder de beschermkap en druk één keer kort op de activeringsknop. Je voorspelde vruchtbaarheidsstatus wordt weergegeven.
2. Druk een tweede keer op de knop en de activeringsring zal met de klok mee knipperen. Je kunt nu een meting uitvoeren.
3. Plaats de sensor zo ver mogelijk naar achteren als comfortabel is, onder de rechter- of linkerkant van je tong, en sluit daarna je mond.
4. "Piep-piep" betekent dat de meetfase met succes is voltooid.
5. De bevestigde vruchtbaarheidsstatus die na de meting wordt weergegeven, is geldig tot middernacht. Je kunt later op de dag je vruchtbaarheidsstatus opnieuw bekijken door kort één keer op de activeringsknop te drukken. De volgende dag schakelt je Daysy vóór je meting over naar de voorspelde vruchtbaarheidsstatus.

* Hoor je een "brom-geluid" in plaats van "piep-piep", dan betekent dit dat de meting niet succesvol was en dat je het opnieuw moet proberen.

Fertility indicators: What each indicator means



Vruchtbaarheidsindicatoren: wat elke indicator betekent

Vruchtbaar / mogelijk vruchtbaar; Ovulatievoorspelling; Onvruchtbaar; Mogelijke zwangerschap; Leerfase / cyclusschommeling (mogelijk vruchtbaar); Zeer waarschijnlijke zwangerschap.

— Step 3: Enter your menstruation

If the violet **“Menstruation”** light is flashing in the activation ring, it means that Daysy is asking for your menstruation input.*

- **If you are menstruating:** Press the activation button until the violet light illuminates without flashing and you hear a “beep”. Confirm you are menstruating for each day of active bleeding and flow for a minimum of 3 consecutive days. Always confirm menstruation, even if you did not take your temperature that day.
- **If you are not menstruating:** You do not have to do anything, just take your temperature.
- **If you are menstruating, but Daysy is not showing the flashing violet light:** Press the activation button until the violet light is constantly illuminated.

** Menstruation can be edited for up to 3 past days. Please enter and edit menstruation on the device itself. For instructions, watch our tutorials at daysy.me/tutorials.*


Stap 3: Voer je menstruatie in

Als het paarse lampje “Menstruatie” in de activeringsring knippert, betekent dit dat Daysy om je menstruatie-invoer vraagt.

- Als je menstrueert: druk op de activeringsknop totdat het paarse licht continu brandt en je een “piep” hoort. Bevestig dat je menstrueert voor elke dag van actieve bloeding en bloedverlies, gedurende minimaal 3 opeenvolgende dagen. Bevestig menstruatie altijd, ook als je die dag je temperatuur niet hebt gemeten.
- Als je niet menstrueert: je hoeft niets te doen; meet gewoon je temperatuur.
- Als je menstrueert maar Daysy geen knipperend paars licht toont: druk op de activeringsknop totdat het paarse licht continu brandt.

* Menstruatie kan tot 3 voorgaande dagen worden aangepast. Voer menstruatie altijd in en wijzig deze op het apparaat zelf. Bekijk voor instructies de tutorials op daysy.me/tutorials.

DaysyDay: Better informed with the Daysy app

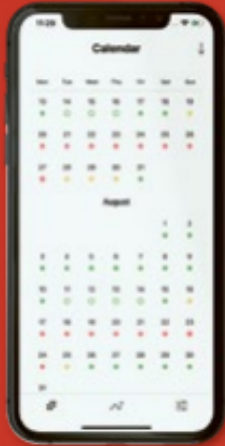

DaysyDay provides valuable insights to your cycle and additional viewing and tracking features, as well as a Partner App.

Turn on **Bluetooth®** on your mobile phone, open DaysyDay and select the **Bluetooth®** button. Follow the on-screen instructions to turn Daysy on and press the Daysy activation button twice briefly. A blue light will light up on your Daysy followed by a brief melody. If the blue light stays lit, it means the connection was successful.



Flashing blue light:
Daysy is connecting.



Continuous blue light:
Daysy is connected.


DaysyDay: beter geïnformeerd met de Daysy-app

DaysyDay geeft waardevolle inzichten in je cyclus en extra weergave- en trackingfuncties, evenals een partner-app. Schakel Bluetooth® in op je mobiele telefoon, open DaysyDay en selecteer de Bluetooth®-knop. Volg de instructies op het scherm om Daysy in te schakelen en druk daarna twee keer kort op de activeringsknop van Daysy. Er gaat een blauw lampje branden op je Daysy, gevolgd door een korte melodie. Blijft het blauwe lampje branden, dan is de verbinding gelukt.

Knipperend blauw licht: Daysy maakt verbinding.

Continu blauw licht: Daysy is verbonden.

— Temperature and fertility: The course of your cycle

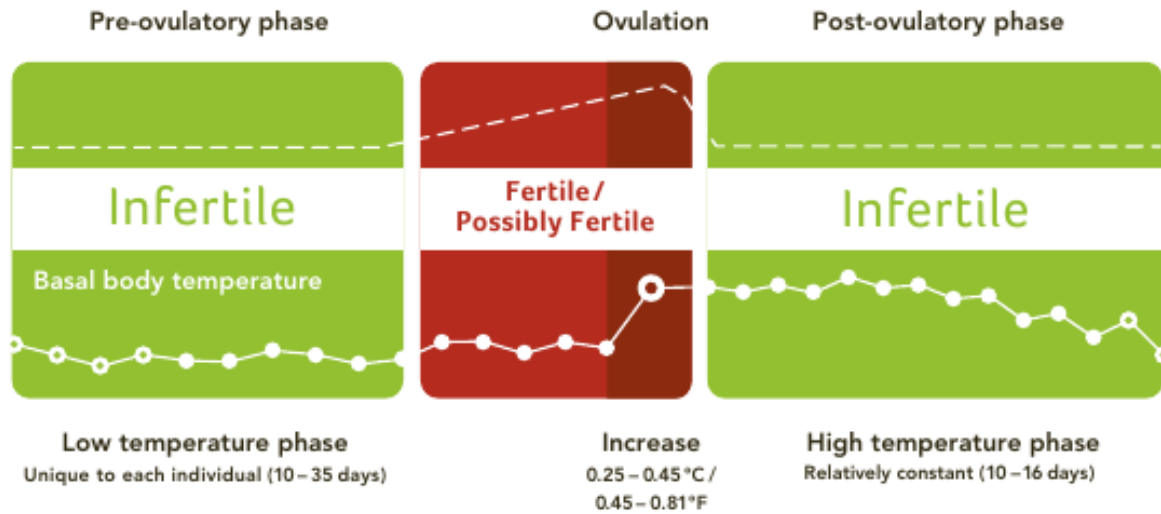

Temperatuur en vruchtbaarheid: het verloop van je cyclus

Pre-ovulatoire fase; Ovulatie; Post-ovulatoire fase; Onvruchtbaar; Vruchtbaar / mogelijk vruchtbaar; Lage temperatuurfase — uniek voor ieder individu (10–35 dagen); Stijging: 0,25–0,45 °C / 0,45–0,81 °F; Hoge temperatuurfase — relatief constant (10–16 dagen); Basale lichaamstemperatuur.

Important: How to you use your Daysy correctly

- Make sure the first thing you do is take your temperature every morning before you get out of bed. For the optimal use of Daysy we recommend that you sleep at least 1 consecutive hour before measuring. If you forget, and have already gotten out of bed, do not proceed to take your temperature.
- If you are menstruating, enter this input accordingly. It is important to begin with the first day of active red blood flow.*
- The more regularly you take your temperature, the faster Daysy will get to know your cycle.
- When you start using your Daysy, you will initially see a lot of yellow and red days. Over the course of the next 3–4 cycles, Daysy learns your unique menstrual cycle rhythm.

* **Important:** *The first bleeding after stopping the pill or other hormonal contraceptive methods is a hormonal withdrawal bleeding and not a menstruation. DO NOT enter this bleeding as menstruation.*

Belangrijk: zo gebruik je je Daysy correct

- Zorg ervoor dat het eerste wat je elke ochtend doet, het meten van je temperatuur is voordat je uit bed stapt. Voor optimaal gebruik van Daysy raden we aan dat je vóór het meten minstens 1 uur aaneengesloten hebt geslapen. Als je het vergeet en al uit bed bent gegaan, meet dan niet meer.
- Als je menstrueert, voer dit dan dienovereenkomstig in. Het is belangrijk om te beginnen met de eerste dag van actieve rode bloeding.
- Hoe regelmatig je je temperatuur meet, hoe sneller Daysy je cyclus leert kennen.
- Wanneer je je Daysy begint te gebruiken, zul je in het begin veel gele en rode dagen zien. In de loop van de volgende 3–4 cycli leert Daysy jouw unieke menstruatiencyclusritme kennen.

* Belangrijk: de eerste bloeding na het stoppen met de pil of andere hormonale anticonceptiemethoden is een hormonale onttrekkingsbloeding en geen menstruatie. Voer deze bloeding NIET in als menstruatie.

— Cleaning

- Clean Daysy before and after every use.
- Use a damp cloth to carefully clean the sensor on your Daysy. You can also use a little alcohol or soap if you wish. Since your Daysy is not waterproof, make sure that only the neck of the sensor, and not the whole appliance comes into contact with water. Do not clean under running water.

Battery

- A single battery charge will last 1–2 months, depending on how often you use your Daysy. To indicate that the battery is nearly empty, the activation ring on your Daysy will flash at frequent intervals. Make sure you charge the battery within a week. With normal use, the battery will still charge to 80% of its capacity after 500 charging cycles.
- **Note:** You should not take measurements while your Daysy is charging.

Reiniging

- Reinig Daysy vóór en na elk gebruik.
- Gebruik een vochtige doek om de sensor van je Daysy voorzichtig schoon te maken. Je kunt desgewenst ook een beetje alcohol of zeep gebruiken. Omdat je Daysy niet waterdicht is, moet je ervoor zorgen dat alleen de hals van de sensor, en niet het hele apparaat, in contact komt met water. Reinig het apparaat niet onder stromend water.

Batterij

- Eén batterijlading gaat 1–2 maanden mee, afhankelijk van hoe vaak je Daysy gebruikt. Om aan te geven dat de batterij bijna leeg is, knippert de activeringsring van je Daysy met korte tussenpozen. Zorg ervoor dat je de batterij binnen een week oplaadt. Bij normaal gebruik laadt de batterij na 500 laadcycli nog steeds op tot 80% van haar capaciteit.
- Opmerking: je mag geen metingen uitvoeren terwijl je Daysy wordt opgeladen.

Error messages / Problems during use

My Daysy does not respond when I press the activation button.

Please charge your Daysy and try activating her again before contacting our Customer Support. Make sure to charge your Daysy every 2–3 months.

The activation ring on my Daysy flashes blue at short intervals.

Please charge the battery on your Daysy.

My Daysy fails to start taking a measurement.

- Remove the USB cable before taking a measurement.
- If your Daysy makes a “beep-beep” sound, it means you have already successfully taken a measurement today.

For more information, read our FAQ at daysy.me or contact our Customer Support.

Foutmeldingen / Problemen tijdens gebruik

Mijn Daysy reageert niet wanneer ik op de activeringsknop druk. Laad je Daysy op en probeer haar opnieuw te activeren voordat je contact opneemt met onze klantenservice. Zorg ervoor dat je je Daysy elke 2–3 maanden oplaadt.

De activeringsring van mijn Daysy knippert met korte tussenpozen blauw. Laad de batterij van je Daysy op.

Mijn Daysy start geen meting. Verwijder de USB-kabel voordat je een meting uitvoert. Als je Daysy een “piep-piep”-geluid maakt, betekent dit dat je vandaag al met succes een meting hebt uitgevoerd.

Lees voor meer informatie onze FAQ op daysy.me of neem contact op met onze klantenservice.

My Daysy ends the measurement with a “grumble-buzz” instead of a “beep-beep”.

The measurement took too long, was interrupted, or was unsuccessful.

Try following these tips:

- As before, place the sensor as far back as is comfortable under the right or left side of your tongue.
- Close your mouth.
- Do not remove the your Daysy from your mouth until you hear the “beep-beep”.
- Daysy may not accept the measurement if you have a fever. Stop taking measurements if you are sick.
- If the sensor gets dirty, simply clean it with a damp cloth.

The red indicator lights up and the activation ring flashes at short intervals.

Something is wrong with your Daysy. Please contact our Customer Support.

Mijn Daysy beëindigt de meting met een “brom-geluid” in plaats van met een “piep-piep”.

De meting duurde te lang, werd onderbroken of is mislukt. Probeer de volgende tips te volgen:

- Plaats, net als eerder, de sensor zo ver mogelijk naar achteren als comfortabel is onder de rechter- of linkerkant van je tong.
- Sluit je mond.
- Haal je Daysy niet uit je mond totdat je het “piep-piep”-geluid hoort.
- Daysy accepteert de meting mogelijk niet als je koorts hebt. Stop met meten als je ziek bent.
- Als de sensor vuil wordt, maak hem dan eenvoudig schoon met een vochtige doek.

Het rode indicatielampje gaat branden en de activeringsring knippert met korte tussenpozen. Er is iets mis met je Daysy. Neem contact op met onze klantenservice.

I won't use my Daysy in the next few months.

What do I need to do?

If you do not intend to use your Daysy for a long period, clean her, charge the battery fully, and store her in a cool, dry place. Make sure to charge your Daysy every 2–3 months.

How does my Daysy communicate with me?

- “Beep-beep”: Daysy is happy. The measurement was a success.
- “Grumble-buzz”: Daysy is unhappy. The measurement was not a success.
- “Beep”: Daysy beeps when you press the activation button.
- Melody: Daysy has just activated **Bluetooth®**.

For more information, read our FAQ at daysy.me or contact our Customer Support.

Ik ga mijn Daysy de komende maanden niet gebruiken. Wat moet ik doen?

Als je van plan bent je Daysy langere tijd niet te gebruiken, maak haar dan schoon, laad de batterij volledig op en bewaar haar op een koele, droge plaats. Zorg ervoor dat je je Daysy elke 2–3 maanden oplaadt.

Hoe communiceert mijn Daysy met mij?

- “Piep-piep”: Daysy is blij. De meting is gelukt.
- “Brom-geluid”: Daysy is niet blij. De meting is niet gelukt.
- “Piep”: Daysy piept wanneer je op de activeringsknop drukt.
- Melodie: Daysy heeft zojuist Bluetooth® geactiveerd.

Lees voor meer informatie onze FAQ op daysy.me of neem contact op met onze klantenservice.

— Technical data

Key features

Name and model: Daysy **Power supply:** Internal power source

Contains FCC ID: WAP2001 **IC:** 7922A-2001 **USB port:** USB 2 Micro-B

Compatibility

Compatibility at date of manufacture. Current compatibilities available on the website and app store descriptions.

iOS: Version 12.0 and higher **Android:** Google Android version 5.0 and higher

Bluetooth®: Version 4.0 and higher

Dimensions: H/W/D 13 / 2.2 / 4.8 cm **Weight:** 38g **EAN Code:** 7 629999 05407 3

Technical Information

You need a **Bluetooth®**-enabled smartphone or a tablet running iOS 12.0 / Android 5.0 or higher to be able to use the DaysyDay app.

Bluetooth®: Bluetooth® 4.1 **Frequency band:** 2400 – 2480 MHz

GFSK modulation: FHSS **Transmitting power:** 0 dBm

Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken: Naam en model: Daysy; Voeding: interne stroombron; Bevat FCC ID: WAP2001; IC: 7922A-2001; USB-poort: USB 2 Micro-B.

Compatibiliteit: iOS versie 12.0 en hoger; Android versie 5.0 en hoger; Bluetooth® versie 4.0 en hoger; Afmetingen 13 / 2,2 / 4,8 cm; Gewicht 38 g; EAN-code 7 629999 05407 3.

Technische informatie: Je hebt een Bluetooth®-geschikte smartphone of tablet met iOS 12.0 / Android 5.0 of hoger nodig om de DaysyDay-app te kunnen gebruiken. Bluetooth® 4.1; frequentieband 2400–2480 MHz; GFSK-modulatie FHSS; zendvermogen 0 dBm.

Indications and contraindications

Indications: Daysy is a menstrual fertility tracker. For optimal use of Daysy, cycle lengths of 19–40 days are the ideal requirement.

Contraindications: In the following cases, you should **not** use Daysy:

- You suffer from a condition in which pregnancy could be dangerous for you, e.g. your blood pressure is too high or too low, you are suffering from heart disease, etc.
- Health risks exist during pregnancy for your unborn child, e.g. if you are suffering from drug or alcohol addiction, or if you are taking medication that may cause birth defects.
- If you are undergoing hormonal treatment, or if you are using hormonal methods of birth control.
- In case of irregular bleeding. This can interfere with the prediction of your fertility or render it unusable.
- Daysy is not a medical thermometer and should not be used to measure body temperature as an indication of fever or illness.

Indicaties en contra-indicaties

Indicaties: Daysy is een menstruele vruchtbaarheidstracker. Voor optimaal gebruik van Daysy zijn cycluslengtes van 19–40 dagen de ideale voorwaarde.

Contra-indicaties: gebruik Daysy niet wanneer zwangerschap gevaarlijk voor je kan zijn, wanneer er gezondheidsrisico's voor het ongeboren kind bestaan, wanneer je hormonale behandeling of hormonale anticonceptie gebruikt, bij onregelmatige bloedingen, of als medische thermometer voor koorts of ziekte.

— Note on electromagnetic compatibility

Electrical medical appliances are subject to special precautions regarding electromagnetic compatibility (EMC). Daysy is intended for non-commercial home use only.

Portable and mobile RF communication appliances may affect medical electrical equipment. Daysy meets the requirements of EN 60601-1-2 for electromagnetic compatibility. Details of this measurement data can be obtained from our Customer Support or from daysy.me.

Target group profile


Women aged 18 or older, who can read and write.

Opmerking over elektromagnetische compatibiliteit

Elektrische medische apparaten vereisen speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Daysy is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel thuisgebruik. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan medische elektrische apparatuur beïnvloeden. Daysy voldoet aan EN 60601-1-2. Details zijn verkrijgbaar via de klantenservice of via daysy.me.

Profiel van de doelgroep: vrouwen van 18 jaar of ouder die kunnen lezen en schrijven.

Device Label

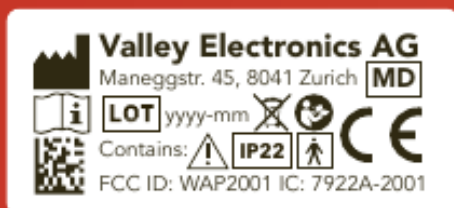

The following figure shows the device label that is attached to the back of your Daysy. The label is shown enlarged for improved readability.

Apparaatlabel

De onderstaande afbeelding toont het apparaatlabel dat op de achterkant van je Daysy is bevestigd. Het label is hier vergroot weergegeven voor betere leesbaarheid.

— General information



Manufacturer



Consult instructions for use



Read these instructions carefully



Attention



CE label



Medical device



**LOT number /
manufacturing date**



**EU Authorised
Representative**



WEEE: Please dispose of this appliance at public recycling depots for electrical appliances. Local laws / regulations prohibit disposing of this appliance with your general domestic garbage.



Type-BF application parts




IP code: Protected against solid foreign bodies with a diameter of 12.5 mm and splash-proof when the housing is tilted at 15°.

Patent number: US 8,998,822
U.S. Patent D865,542

Algemene informatie

Fabrikant; Raadpleeg de gebruiksaanwijzing; Lees deze instructies zorgvuldig; Let op; CE-markering; Medisch hulpmiddel; LOT-nummer / productiedatum; EU-gemachtigde vertegenwoordiger; WEEE: lever dit apparaat in bij openbare inzamelpunten voor elektrische apparaten; Toegepaste onderdelen van type BF; IP-code: beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en spatwaterdicht wanneer de behuizing 15° helt; Octrooinummer: US 8,998,822 U.S. Patent D865,542.

Storage and operating conditions

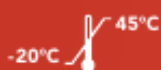

Temperature limit: This device can be stored at temperatures between -4°F and 113°F / -20°C and 45°C .



Temperature limit: This device can be used without restriction at temperatures between 41°F and 104°F / 5°C and 40°C .



Humidity limit: This device can be stored without restriction at a relative humidity up to 93 %.



Humidity limit: This device can be used without restriction at a relative humidity of between 15 % and 93 %.



Pressure limit: This device can be stored at pressures of between 700 hPa and 1060 hPa.



Pressure limit: This device can be subjected to pressures of between 700 hPa and 1060 hPa.

Opslag- en gebruiksomstandigheden

Temperatuur opslag: -20°C tot 45°C . Temperatuur gebruik: 5°C tot 40°C . Relatieve luchtvochtigheid opslag: tot 93%. Relatieve luchtvochtigheid gebruik: 15% tot 93%. Druk opslag: 700 hPa tot 1060 hPa. Druk gebruik: 700 hPa tot 1060 hPa.

— Warranty information

Daysy has been manufactured with the utmost care using premium-quality, state-of-the-art materials. Each Daysy is subjected to numerous controls and inspections prior to delivery.

1. We guarantee the original purchaser that Daysy is free of defects in materials and workmanship during the warranty period.
2. The warranty period begins on the day the new Daysy is sold to the end user by an authorized dealer.* The warranty is valid for two years.
3. We undertake to either repair a defective device or replace it with a new one. Further claims, and, in particular, claims for losses and damages, including consequential damages, are excluded. The warranty does not cover indirect damages.

** Please note that our limited warranty applies only if you purchased your Daysy from an authorized Valley Electronics dealer.*

Garantie-informatie

Daysy is met de grootste zorg vervaardigd uit hoogwaardige, moderne materialen. Elke Daysy wordt vóór levering onderworpen aan talrijke controles en inspecties. 1. Aan de oorspronkelijke koper wordt gegarandeerd dat Daysy vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de garantieperiode. 2. De garantieperiode begint op de dag waarop een nieuwe Daysy door een geautoriseerde dealer aan de eindgebruiker wordt verkocht. De garantie is twee jaar geldig. 3. Er wordt toegezegd een defect apparaat te repareren of te vervangen door een nieuw exemplaar. Verdere aanspraken, inclusief gevolgschade, zijn uitgesloten. De garantie dekt geen indirecte schade.

4. The warranty does not cover any damage caused by improper handling, especially by opening the device, or by other external influences.
5. Warranty claims are only valid if the user indicates the defect immediately in writing within two weeks after such a defect is discovered. Once the defect is discovered, the user should no longer use the Daysy, but return it to the authorized distributor with a copy of the original purchase invoice via insured delivery.

If you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact your Daysy dealer.

© Valley Electronics AG, Zurich. All rights reserved, 2023-03-16.
Daysy is a registered trademark of Valley Electronics AG.

4. De garantie dekt geen schade door onjuist gebruik, in het bijzonder door het openen van het apparaat, of door andere externe invloeden. 5. Garantieclaims zijn alleen geldig als de gebruiker het defect onmiddellijk en uiterlijk binnen twee weken na ontdekking schriftelijk meldt en de Daysy met aankoopfactuur verzekerd terugstuurt naar de geautoriseerde distributeur. Neem bij vragen contact op met je Daysy-dealer. © Valley Electronics AG, Zurich. Alle rechten voorbehouden, 2023-03-16. Daysy is een geregistreerd handelsmerk van Valley Electronics AG.

Overview: What do the indicators mean?

Status Indicator			M light	Ring	Meaning
Red	Green	Yellow	Violet	Blue	
Illuminated	–	–	–	–	Fertile / possibly fertile
Flashes	–	–	–	–	Ovulating (prediction)
–	Illuminated	–	–	–	Infertile
–	–	Illuminated	–	–	Learning phase or cycle fluctuation
Illuminated	Illuminated	Illuminated	–	–	Highly probable pregnancy
Flashes	Flashes	Flashes	–	–	Possible pregnancy
–	–	–	Flashes	–	Daisy asks for your menstruation input
–	–	–	Illuminated	–	Menstruation confirmed for this day
–	–	–	–	Rotates	Temperature measurement
–	–	–	–	Flashes	Charge battery
–	–	–	–	Rising	Battery charging
–	–	–	–	Illuminated	Battery charged
–	–	–	–	1 light flashes	Bluetooth® enabled, but no connection
–	–	–	–	1 light illuminated	Bluetooth® enabled, connection is established

Statusindicator	M-licht	Ring	Betekenis
Rood brandt	–	–	Vruchtbaar/mogelijk vruchtbaar
Rood knippert	–	–	Ovulatie (voorspelling)
Groen brandt	–	–	Onvruchtbaar
Geel brandt	–	–	Leerfase of cyclusschommeling
Rood, groen en geel branden	–	–	Zeer waarschijnlijke zwangerschap
Rood, groen en geel knipperen	–	–	Mogelijke zwangerschap
Violet knippert	–	–	Daisy vraagt om invoer van je menstruatie
Violet brandt	–	–	Menstruatie bevestigd voor deze dag
Blauw roteert	–	–	Temperatuurmeting
Blauw knippert	–	–	Batterij opladen
Blauw loopt op	–	–	Batterij wordt opgeladen
Blauw brandt	–	–	Batterij opgeladen
1 blauw licht knippert	–	–	Bluetooth® ingeschakeld, maar geen verbinding
1 blauw licht brandt	–	–	Bluetooth® ingeschakeld, verbinding tot stand gebracht

Overzicht: wat betekenen de indicatoren?

Rood brandt = Vruchtbaar / mogelijk vruchtbaar. Rood knippert = Ovulatie (voorspelling). Groen brandt = Onvruchtbaar. Geel brandt = Leerfase of cyclusschommeling. Rood, groen en geel branden = Zeer waarschijnlijke zwangerschap. Rood, groen en geel knipperen = Mogelijke zwangerschap. Paars knippert = Daysy vraagt om invoer van je menstruatie. Paars brandt = Menstruatie bevestigd voor deze dag. Blauw roteert = Temperatuurmeting. Blauw knippert = Batterij opladen. Blauw loopt op = Batterij wordt opgeladen. Blauw brandt = Batterij opgeladen. 1 blauw licht knippert = Bluetooth® ingeschakeld, maar geen verbinding. 1 blauw licht brandt = Bluetooth® ingeschakeld, verbinding tot stand gebracht.